




OFA·Drill

Orthopaedic Foot and Ankle

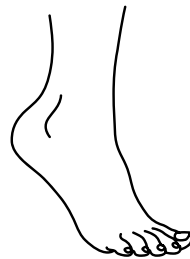

OFA-Drill, Motor-System für die perkutane Fußchirurgie

Der OFA-Drill ermöglicht die Steuerung einer Vielzahl von Handstücken für die minimalinvasive-perkutane Fußchirurgie, mittels eines einfach zu bedienenden Motor-Systems.

- 4 : 1 Handstück für bis zu 12'000 U/min.
- 16 : 1 Kirschner-Handstück für Drähte von 0,8 – 1,5 mm Ø
- Alle Novag-Sägen einsetzbar
- Fein drehender Elektronikmotor
- Alle Instrumente aus medizinischem Edelstahl
- Fuß-Schalter zur Aktivierung der Pumpe und zur Drehrichtungswahl. Drehzahl-Steuerung über das Pedal.
- Display mit allen Informationen auf einen Blick
- Robust, zuverlässig, Schweizer Qualität



OFA-Drill
Orthopaedic Foot and Ankle



Technische Daten, OFA-Drill Motor System

Spannung:	100/115/230 Volt bei 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	120 VA
Max. Drehmoment (Motor):	6 Ncm
Drehzahl-Bereich (Motor):	300 – 50'000 rpm
Schutzklasse:	Class I
Anwendungsteil:	Typ B*
Dimensionen (B x T x H):	260/250/110 mm
Gewicht Steuergerät:	3,3 kg

* Anwendungsteil ist das angeschlossene Instrument

Lieferumfang (Ref. 3393):

- OFA-Drill Steuergerät
- Vario Pedal (elektronisch)
- Elektronik-Motor, 3 m Kabel
- 6024 Schlauchset (Steril, Einmalgebrauch)
- Clip-Set zur Schlauchsetmontage am Motorkabel
- Kühlflüssigkeit (1 Liter)
- Stativ für Kühlflüssigkeit
- Handstückablage
- Spray-Aufsatz zur Pflege von Motor und Handstücken
- Gebrauchsanweisung



Jacobs Bohrhandsstück (Ref. 1955)

Bohrer Ø:	0,3 – 7,4 mm
Gewicht:	530 g
Drehzahl:	80 bis 2100 rpm
Drehmoment:	60 Ncm
Kupplung:	nach INTRA EN3964



4 : 1 Handstück (Ref. 1043)

für die Fußchirurgie mit Sprühaufsatz und Schnellspannverschluss für Werkzeuge von 44 – 70 mm Länge/ Ø 2,35 mm



Kirschner Handstück (Ref. 5160)

mit 90 mm Länge, 16:1 Untersetzung für eine Drehzahl von bis zu 2500 U/min, für Chirurgie-Drähte von 0,8 bis 1,5 mm Ø.



1 : 1 Chirurgisches Standard-Handstück (Ref. 1710)

mit Sprühaufsatz und Schnellspannverschluss für Werkzeuge ab 44 mm Länge/ Ø 2,35 mm




Sagittal Mikrosäge (Ref. 5110)

mit INTRA-Kupplung nach INTRA EN3964, abnehmbare Aussenkühlung, empfohlene Motordrehzahl 15'000 Oszillationen/min.

K-Wires

Länge	Ø mm	Ref.
70 mm	0.8	5013
70 mm	1.0	5014
150 mm	0.6	5023
150 mm	0.8	5015
150 mm	1.0	5016
150 mm	1.2	5017
150 mm	1.5	5018

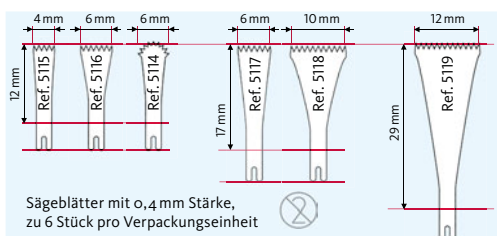

Sägeblätter mit 0,4 mm Stärke, zu 6 Stück pro Verpackungseinheit